


«ЭРЕКТОН» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Компания «Эректон» – крупнейший дистрибьютор первичной фармацевтической упаковки в России – является неизменным с 2000 г. участником выставки «Фармтех». Для нас участие в выставке – это прекрасная возможность не только продемонстрировать всё разнообразие поставляемой нами продукции, но и встретиться с потребителями, обсудить с ними актуальные вопросы стремительно развивающегося и постоянно меняющегося фармацевтического рынка и вместе выработать вектор совместной работы на следующий год.

Для фирмы «Эректон» 17-ая выставка «Фармтех-2015», как и весь 2015 год, прошла под знаком 20-летнего юбилея успешного сотрудничества с компанией «Datwyler Pharma Packaging». Наши давние эксклюзивные партнеры приняли активное участие в работе выставки, а директор международного отдела по научным исследованиям компании «Datwyler», г-н Рено Янсен, провел семинар «Техническая поддержка покупателей», в котором активно участвовали представители российских компаний-фармпроизводителей.

Кроме компании Datwyler (Бельгия, Италия, Германия) на прошедшей выставке мы, как всегда, представили продукцию других наших эксклюзивных партнёров, лучших европейских производителей – АВА (Польша), SGD (Франция, Германия) и OMPI (Италия, Словакия), а также таких известных и уважаемых компаний как Gerresheimer (Германия, Дания, Польша), Stolzle (Австрия, Чехия), НРТ (Германия), ElmPlastic (Германия).

В рамках стратегии импортозамещения применительно к зарубежным фармацевтическим препаратам мы в 2015 году предложили российским фармпроизводителям стерильную, готовую к использованию упаковку для инъекционных лекарственных средств (флаконы, пробки, колпачки), которая позволит фармацевтическим предприятиям освоить производство как новых инновационных препаратов, так и традиционных в более короткие сроки и с наименьшими потерями.

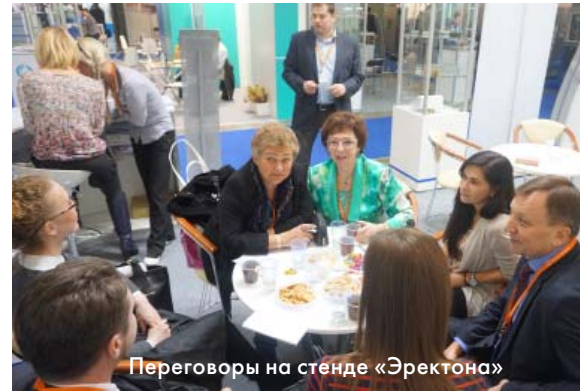

Переговоры на стенде «Эректона»

Оставаясь верными нашему девизу – «мы сделаем все, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным» – и, учитывая интересы наших клиентов, сложную ситуацию на рынке, а также необходимость расширения ассортимента ряда продукции, в 2015 году мы начали активно работать на рынке Китайской Народной Республики и постепенно пополняем список наших поставщиков производителями из КНР, подтвердившими качество своей продукции сертификатами ISO GMP 15378 или 13485.

«BD MEDICAL» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Компания **BD Medical-Pharmaceutical Systems** предлагает широкий ассортимент инновационных систем для доставки лекарственных средств, в том числе предварительно наполненные шприцы, автоинъекторы, защитные и предохранительные устройства, а также технические решения, касающиеся игл для шприцев, предназначенные для удовлетворения текущих и потенциальных потребностей фармацевтической промышленности.

Стеклопластиковые предварительно наполненные шприцы **BD Нурак™ For Vaccines** – это оптимальное решение для обеспечения более высокого и без-

опасного уровня применения вакцин. Внедрение новых технологий и улучшенных программ управления на наших производственных предприятиях гарантирует стабильные, постоянные и надежные поставки шприцев для удовлетворения различных рыночных потребностей.

BD UltraSafe Passive™ и **BD UltraSafe Plus™** – это устройства защиты для предварительно наполненных шприцев, которые обеспечивают удобную в использовании автоматическую активацию одной рукой. **BD Ultra Safe Plus™** являются новейшей разработкой, завершающей широкий ряд предохранительных и защитных устройств, выпускаемых компанией BD.



Е. Барбато, О. Чебаева, П. Вилдинг, «Becton Dickinson»

«ОСМІ» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Компания ОСМІ представила новую машину для изготовления флаконов FLA 20/E с улучшенными показателями, а именно, повышенной производительностью и точностью изготовления флаконов медицинского назначения.

Основные характеристики машины ОСМІ FLA20/E с 20 станциями для формовки флаконов, спроектированной для соединения с послеформовочной линией Modern Mecanique LF520, были модернизированы. Основной целью модернизации было увеличение производительности машины, без ущерба качеству производимых флаконов. Благодаря этому, машина ОСМІ FLA20/E обладает уникальными характеристиками, аналогов которым не существует на рынке.

Базовая конфигурация машины FLA20/E включает в себя узел формовки венчиков флаконов посредством двух станций предварительной формовки и двух станций финальной формовки. Первая станция формовки оснащена только одним роликом для подготовки плеча флакона, а вторая станция имеет два ролика и один плунжер для того, чтобы сделать процедуру финальной формовки более простой и точной. Две станции финальной формовки, каждая из которых оснащена двумя роликами и одним плунжером, установлены на каретке вместе с последними двумя разогревающими горелками. Таким образом, машина способна формовать два флакона за один шаг и увеличить тем самым скорость до 3.000 флаконов формата 2R в час.



А. Малышев, «Каэлер Инжиниринг СНГ», D.A. Crescentini, «ОСМІ»